

Uw locale dealer:

BCO dental bv
W.M. Dudokweg 8a
1703 DB Heerhugowaard
+31 72 576 2810
verkoop@bcodental.nl
www.bcodental.nl

Sales and Technical Support Europe:

Jensen Dental GmbH
Gustav-Werner-Straße 1
72555 Metzingen, Germany
+49 7123-92260
info@jensendental.de
www.jensendental.de | www.miyoworld.eu

Manufactured by:

Chemichl AG
Landstrasse 114
9490 Vaduz, Liechtenstein
info@chemichl.com
www.chemichl.com



4381040523



QUICK START GUIDE

nederlands

Voor een perfecte start.



Bereiding | Gebruiksaanwijzing

Vorbereitung


- Voordat het materiaal wordt aangebracht, moet het oppervlak schoon en vrij van vervuiling zijn.
- Het oppervlak kan worden gezandstraald met 50/110 µm en 1,5 bar druk.

Instructies voor gebruik

- Giet geen overtollige vloeistof uit de verpakking. Meng het terug tot een pasta.
- Glazuurpasta voor elk gebruik grondig mengen met een metaalvrije spatel.
- De pasta mag niet in contact komen met water.
- Gebruik altijd een schoon en droog penseel.

Opslag en verwijdering

- Droog bewaren.
- Kleine hoeveelheden kunnen bij het huisvuil.

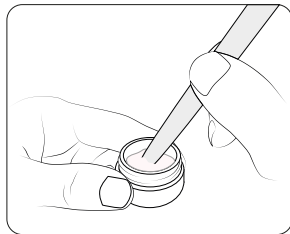

Meng grondig met een metaalvrije spatel.

Bakschema

Bakparameters*	
Starttemperatuur [°C]	400 - 450
Droogtijd [min]	3
Sluitingstijd [min]	4
Oploopsnelheid [°C / min]	45
Wachttijd1 [s]	30 - 45
Start vacuüm [°C]	580
Eindtemperatuur [°C]	710 - 720
Einde vacuüm [°C]	710 - 720
Wachttijd 2 [s]	30 - 60
Openingstijd [min]	1

* De baktemperaturen zijn standaardwaarden en kunnen variëren afhankelijk van het type oven.

Support

Algemene vragen en technische ondersteuning op 1e niveau:
verkoop@bcodental.nl
+31 72 576 2810
2e niveau technische ondersteuning:
support@jensendental.de

Downloads

Het veiligheidsinformatieblad en de snelstartgids kunnen worden gedownload op:
www.jensendental.de/en/downloads-en

