


! Fermeture facile

Tous les flacons de liquides sont équipés d'un bouchon rotatif très pratique.

Retirer d'abord le sceau

Le bouchon supérieur s'ouvre et se ferme ensuite facilement, même avec une seule main.

Il est donc possible de faire couler le liquide goutte à goutte.

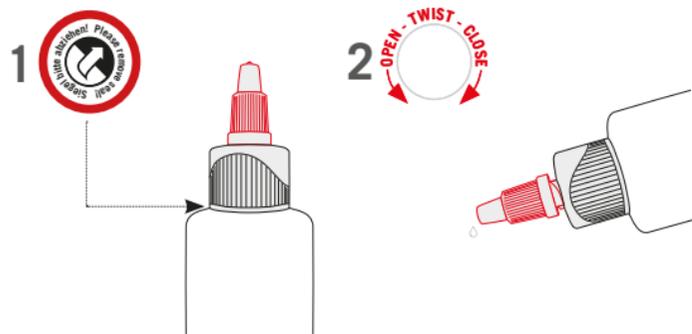

Distributeur en France:

Rotec
6 Rue de la Briquerie
ZA de Villejames
44350 GUÉRANDE
Tel. 02 40 62 11 02
contact@rotec.fr
www.rotec-fr.com



Distribution et support technique Europe:

Jensen GmbH
Gustav-Werner-Straße 1
72555 Metzingen, Germany
Tel: +49 7123 92260
info@jensendental.de
support@jensendental.de
www.jensendental.de



4307020823

InSync[®] MC

Céramique à stratifier

QUICK START GUIDE

Français



Pour un départ idéal.



Tableau de cuisson

! Les températures de cuisson ci-dessous sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction du type de four utilisé. Pour les bridges grande portée ou les restaurations monolithiques, la montée en température doit être ajustée à environ 30°C / min.

	Température de départ [°C]	Durée de séchage [min]	Durée de fermeture [min]	Début du sous vide [°C]	Montée en température [°C / min]	Température finale [°C]	Fin du sous vide [°C]	Durée de maintien [min]	Durée d'ouverture [min]
Cuisson wash	450	4	3	450	80	950	950	1	1
Cuisson d'opaque	450	4	3	450	80	950	950	1	1
1 ^{ère} Cuisson margin	450	3	3	450	60	900	900	1	1
2 ^{ème} Cuisson margin	450	3	3	450	60	890	890	1	1
1 ^{ère} Cuisson dentine	450	4	3	450	60	880	880	1	1
2 ^{ème} Cuisson dentine	450	4	3	450	60	870	870	1	1
Cuisson de correction*	450	4	3	450	60	800	800	1	1
Cuisson de glaçage sans glazure	450	---	3	---	55	860	---	1	1
Cuisson de glaçage avec glazure	450	4	3	600	50	780	780	1	1

* Cuisson de correction avec masses de correction.



Table de combinaison des couleurs

Couleur	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Opaquer	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Margin	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Opaque Dentin	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Dentin	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Enamel	57	58	58	60	60	57	58	59	60	58	58	59	60	57	58	59

Couleur	BLEACH 1	BLEACH 2	BLEACH 3	BLEACH 4
Opaquer	A0	B0	A0	A0 / B0
Opaque Dentin	BL1	BL2	BL3	BL4
Dentin	BL1	BL2	BL3	BL4
Enamel	BL	BL	BL	BL



Downloads

Workbook, fiche technique, fiche de données de sécurité ...
Sont disponibles au téléchargement sur : www.jensendental.de/downloads